

# NG PRECISION+

## TEST DI GRAVIDANZA NEL SANGUE

### IL TUO TEST



Tampone di alcool



Salvietta di carta



Cronometro

NON INCLUSO



### IMPORTANTE

- Controllare la data di scadenza.
- Non aprire la confezione di alluminio prima di aver letto completamente le istruzioni per l'uso e di essere pronti a fare il test.
- Utilizzare subito dopo l'apertura.

### REALIZZARE E INTERPRETARE IL RISULTATO DEL TEST

Consultare la procedura dettagliata sul retro.

### DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

#### 1 Quando posso realizzare il test NG Precision+?

Il test è in grado di rilevare una quantità molto piccola (sensibilità di 10 mIU/mL) di hCG (gonadotropina corionica umana), un ormone prodotto dal corpo dall'inizio della gravidanza. Si consiglia di utilizzare il test il più vicino possibile alla presunta data del prossimo ciclo in modo da ottenere la massima affidabilità del test di gravidanza. Di fatto, se il test viene effettuato troppo presto, i livelli dell'ormone hCG potrebbero non essere abbastanza alti da essere rilevati, il che porterebbe ad un risultato negativo.

#### 2 Quanto tempo devo attendere prima di leggere il risultato del test?

Bisogna attendere almeno 5 minuti prima di leggere il risultato (non attendere più di 10 minuti per leggere il risultato).

#### 3 Il risultato indica che sono incinta: cosa devo fare?

Dovresti rivolgerti al tuo medico o ginecologo, affinché ti consigliino sui prossimi passi da seguire.

#### 4 Il risultato del test indica che non sono incinta, ma non sono molto convinta?

Potresti aver realizzato il test troppo presto rispetto alla data prevista del tuo prossimo ciclo. Realizza un altro test dopo 48 ore. Se il risultato del test è ancora negativo 3 giorni dopo la data prevista del tuo prossimo ciclo, rivolgiti al medico.

#### 5 Perché NG Precision+ si realizza nel sangue?

Quando sei incinta il corpo produce un ormone (hCG) che si può rilevare prima nel sangue rispetto alle urine. Per questo motivo i laboratori realizzano i test di gravidanza nel sangue.

#### 6 Il test è doloroso?

Pungere il dito per ottenere una goccia di sangue è indolore. Ruotare e togliere la linguetta verde indicatrice di sterilità, quindi premere con decisione il pulsante grigio per pungere il dito.

#### 7 Il test non ha funzionato correttamente (non è apparsa la linea di controllo).

• Hai collocato il test su una superficie piana dopo esserti punta il dito?

• Hai letto il risultato prima di aver atteso 5 minuti?

• Ti sei assicurata di aver riempito completamente il tubo di sangue? In ogni caso devi ripetere il test.

#### 8 Qualche farmaco o condizione medica può influenzare il risultato?

• Alcuni farmaci, trattamenti o patologie possono influenzare il risultato, come i farmaci per il trattamento dell'infertilità con hCG, somministrati per iniezione.

• Se sei stata incinta di recente, il test può rilevare un residuo di hCG nel sangue.

• Se sei in menopausa o pre-menopausa. Se ottieni dei risultati inaspettati, rivolgiti al medico.

#### 9 Posso riutilizzare il test?

No, questo test è personale e monouso.

### CONSIGLI PER IL PRELIEVO DEL CAMPIONE

- In primo luogo lavati le mani con acqua calda e asciugale bene.
- L'acqua calda ha l'effetto di migliorare la circolazione del sangue nei polpastrelli.
- Puoi lasciare cadere le braccia lungo i fianchi per un minuto in modo da aumentare l'afflusso del sangue.
- Se non appare immediatamente la goccia di sangue premere il dito dietro la zona della puntura affinché si formi la goccia di sangue.

### USO PREVISTO E PRINCIPIO DEL TEST

Quando una donna è incinta, il suo corpo produce la Gonadotropina Corionica Umana (hCG). NG Precision+ è un test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa della hCG nel sangue intero capillare umano prelevato dal polpastrello con una sensibilità di 10 mIU/mL.

Questo test rapido e facile da usa si può realizzare ovunque e in qualsiasi momento del giorno.

Il test viene effettuato depositando la goccia di sangue prelevata dal polpastrello nel pozzetto del test attraverso il tubo capillare.

Viene quindi erogata una soluzione per agevolare la migrazione del campione di sangue.

Il test include anticorpi che rilevano l'hCG e, in caso di risultato positivo, creano una linea colorata nell'area «T» del test. I componenti reattivi sono un anticorpo monoclonale anti- $\alpha$ -hCG e un anticorpo monoclonale anti- $\beta$ -hCG coniugato con un marcatore visivo (oro colloidale).

### PRECAUZIONI

- Il test è monouso. Non riutilizzare.
- Non usare il test se la confezione è danneggiata o lacerata.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Una volta aperta la confezione, utilizzare il test immediatamente.
- Niente deve entrare in contatto con la finestra di lettura (area dei risultati).
- Conservare il test nella sua confezione tra i 4°C e i 30°C. Il test è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola. Non congelare.
- NG Precision+ è stato concepito per essere utilizzato solo con campioni di sangue.
- Il sangue deve essere trasferito immediatamente alla striscia reattiva.
- Nell'attesa del risultato, il test deve essere appoggiato su una superficie piana. Non orientare mai il test verso l'alto.

### SMALTIMENTO

Per smaltire NG Precision+ collocare il test e il contenuto del kit in un sacchetto dei rifiuti e portarlo in una farmacia affinché venga distrutto.



NG-BIOTECH®  
LABORATOIRES

Z.A. Courboubon - Secteur 1  
35480 Guipy - FRANCE

www.ngprecision.com

REF

Numero di catalogo

LOT

N.° di lotto

IVD

Dispositivo medico  
diagnostico *in vitro*



Produttore



Limiti della temperatura  
di conservazione 4°C-30°C



Fare riferimento  
alle istruzioni per l'uso



Non riutilizzare



Non utilizzare se  
l'imballaggio è danneggiato



Contenuto  
sufficiente per 1 test




Termine ultimo  
per l'utilizzo

CE 0483


## 1 PREPARAZIONE



Massaggiare il dito per qualche secondo (medio o anulare), pulirlo con il tamponcino di alcool e lasciare asciugare all'aria.

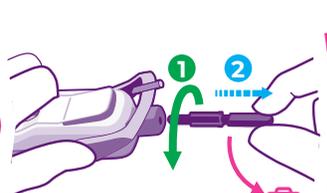

Ruotare e togliere la linguetta verde, quindi gettarla.

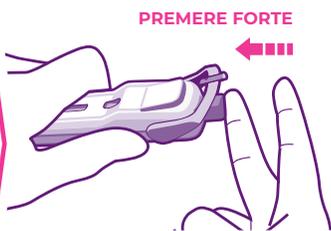

Premere il pulsante grigio per pungere il dito.

**!** Può pungere solo una volta

## 2 RACCOLTA

Collocare il test nello spazio indicato sul foglio di istruzioni. Premere forte il dito dietro la zona della puntura per ottenere il campione di sangue. Riempire completamente il tubo del sangue.



Tubo del sangue

Collocare la goccia di sangue sulla punta del tubo del sangue



**×** MEZZO PIENO



**! IMPORTANTE**  
In caso di difficoltà, pulirsi il dito e premere di nuovo



**!** Il tubo deve essere completamente pieno




**✓** PIENO

Il tubo del sangue ora contiene la giusta quantità di sangue

## 3 RISULTATI

Mantenere il test sul tavolo. Quindi capovolgere il tubo del sangue sul pozzetto.

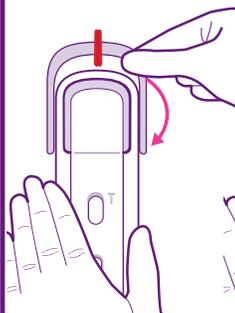


**CAPOVOLGERE**  
Controllare che il sangue sia passato dal tubo al pozzetto



Premere con decisione il pulsante di attivazione per attivare il test

**CLIC**

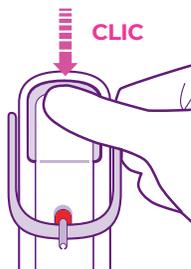

**E ATTENDERE 5 MINUTI**



Non leggere una volta trascorsi 10 minuti.

### INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

INCINTA	NON INCINTA	
	NON VALIDO	



Lasciare il test qui, dal momento che aiuta a riempire il tubo del sangue

**COLLOCARE  
E  
LASCIARE  
IL TEST  
QUI**

